

## **Möjligheter med One-Step**

One-Step är konstruerad och tillverkad för samma pålitlighet och kvalitet som t.ex JellyBean och BIG kontakterna. Detta innebär att One-Step är :

### **Enkel att använda**

Tryck ner recordknappen och One-Step's överdel samtidigt som du talar i mikrofonen. Släpp och One-Step är klar att använda.

### **Känslig**

Den färgglada överdelen är lika lätttryckt över hela sin yta. Ett tryck spelar upp hela meddelandet. För att repetera, bara tryck igen. Kontinuerligt tryck startar ej en repetition.

### **Tyst eller högljudd**

Justera volymen till lämplig nivå.

### **Flexibel**

Valfri manöverkontakt med 3,5mm's telepropp kan anslutas för aktivering.

### **Hållbar**

Det splitterfria plasthöljet är enkelt att hålla rent.

### **Ett redskap för förstärkt orsak/verkan träning**

One-Step kan aktivera en leksak eller annan el.apparat samtidigt som det inspelade meddelandet återges.

**Kontakta gärna RehabCenter AB  
för ytterligare information**

**Tel. 08 - 768 25 00  
Fax. 08 - 792 49 49**

---

## **Användarvägledning**

# **One-Step Communicator**

Ett hjälpmedel i serien

# **AbleLink™**

c-o-n-n-e-c-t-a-b-l-e-s

Ett hjälpmedel  
för träning och kommunikation  
med  
ett talat meddelande

---


## One-Step Communicator

Denna bruksanvisning presenterar One-Step och ger råd om användning och skötsel för bästa funktion. Läs bruksanvisningen noga och spar den för framtida behov.

Vi är glada för alla synpunkter och förslag till förbättringar av denna och andra bruksanvisningar, produkter eller tjänster.

### Batteri installation och byte.

1. Tag bort bottenplattan (om den är monterad) genom att försiktigt trycka ner snäpplåset, drag sedan bottenplattan bakåt.
2. Tag bort batteriluckan och sätt i ett 9-volt batteri. Anslut batterikontakten med plus (+) och minus (-) polerna rätt vända enligt markering på batteriet.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och ev. bottenplatta.

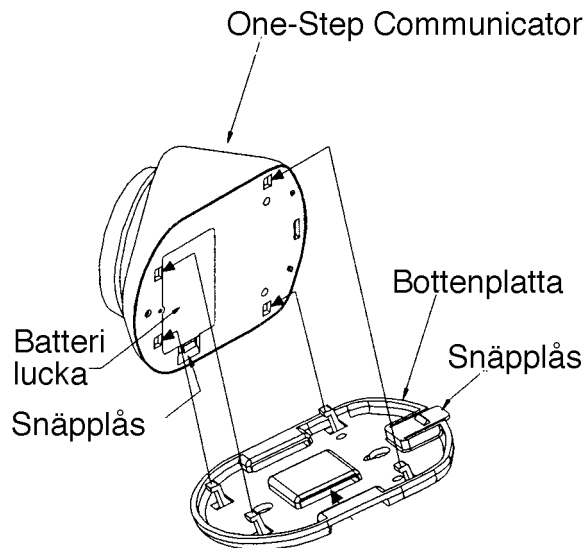

## Användning av One-Step

One-Step är idealisk för :

- Någon som just börjat använda en switch.
- Den som just börjat utveckla sin kommunikationsförmåga.
- Att använda som en möjlighet att väcka uppmärksamhet.

One-Step är enkel att använda och har god ljudkvalitet. Det är enkelt att ändra talmeddelande för olika situationer. Några exempel på användning av One-Step är.

- Att säga hej till kamrater och familj.
- Be om hjälp med olika saker.
- Beställa mat i cafeterian.
- Ropa på ett husdjur.
- Säga ett ord eller fras som upprepas i en sång eller lek.

Att ofta ändra / byta meddelanden ger användaren större möjligheter att använda sin One-Step.

När så är möjligt bör talmeddelandet spelas in av någon med för användaren lämplig röst. T.ex barnröst för barn.

## Kundservice, reparationer och returer.

Ring oss gärna vid frågor eller oklarheter och vi skall gärna försöka lösa dessa via telefon.

Ring gärna och berätta om eventuella problem innan apparaten returneras för service. Om apparaten skickas till oss, glöm ej att bifoga följande för snabb service :

- Kopia på faktura. ( Vid eventuella garantianspråk)
- Namn på kontaktperson.
- Organisation - Institution - Hemadress.
- Telefonnummer.
- Leverans och fakturaadress.
- Ett kort brev angående orsak till returen.

Om garanti gäller kommer apparaten att repareras eller ersättas utan någon kostnad.

## Spela in ett meddelande.

Meddelanden på upp till tjugo sekunder kan spelas in. Det motsvarar ca 25 - 30 ord. Om meddelandet blir mer än tjugo sekunder kommer One-Step att automatiskt avsluta mitt i meddelandet.

Vad du gör	Vad som sker	Tips
Tryck först in record knappen och sedan överdelen på One-Step. Håll ner bägge under inspelningen.	Inspelningskretsen aktiveras.	Håll One-Step på ca 20 - 30 cm avstånd från munnen.
Tala i den inbyggda mikrofonen.	Meddelandet spelas in.	Rikta talet mot mikrofonen. Max taltid är 20 sekunder.
Släpp både knapp och överdel när meddelandet klart.	Inspelningen slutar.	
Tryck ner och släpp överdelen på One-Step igen.	Meddelandet spelas upp	One-Step klargörs för användaren och förlänger batteriets livslängd.

### Kabel anslutning: Batteridrivna utrustningar för direktkontroll

En batteridrivna leksak kan anslutas till One-Step med kabel för batteridrivna leksak (kabel kan fås från RehabCenter). Ansluten på detta sätt kommer leksaken att vara aktiverad lika länge som meddelandet varar.

### Kabel anslutning: 220v el. utrustningar för kontroll via styrbox

En 220v el.apparat måste alltid anslutas via godkänd styrbox. Använd t.ex PowerLink 2 som är en provad och godkänd styrbox.

#### Vad du gör

Koppla in styrboxen till 220v uttag.  
Koppla in el.apparaten i styrboxen

Se till att till/från knappen på el.-  
apparaten är tillslagen.

#### Tips

Se bruksanvisningen till styrboxen  
för mer information.

Ibland måste till/från knappen  
fästas med tape eller liknande.

Koppla One-Step kabelns ena ände till styrboxen och den andra till kontakt märkt Toy/Apl. på One-Step.

One-Step kabeln ingår i One-Step leveransen.

Aktivera One-Step

Styrboxens inställning avgör hur länge el.- apparaten

är aktiverad.

### On/Off

On/Off kontrollen är samtidigt volymkontroll. One-Step bör stängas av helt när den inte används. Det görs genom att kontrollen vrids till det klickar till i off läge. Detta förhindrar dels att One-Step talar p.g.a ett tryck av misstag och dels minskar strömförbrukningen.

### Yttre manöverkontakter

Alla manöverkontakter med 3,5 mm plugg kan användas för att aktivera One-Step. Koppla in manöverkontakten i kontakten märkt ”switch”. One-Step fungerar som vanligt även med extra manöverkontakt ansluten.

### Montagemöjligheter

One-Step kan med hjälp av den löstagbara bottenplattan monteras på många sätt. Den kan t.ex hängas på väggen med hjälp av nyckelhålen. Det finns även tre hål som passar till fästplattan (liten triangel) som medföljer Slimarmen från RehabCenter AB. Slimarmen och är Universalarmen är båda mkt flexibla och stadiga och kan fästas på ett bord eller rör.

### Skötsel

One-Step kommer att fungera under lång tid med ett minimum av service. Om en One-Step inte skall användas på lång tid bör den förvaras utan batteri p.g.a viss risk för läckage från dåliga batterier.

One-Step får endast rengöras med torr eller lätt fuktad trasa.

**One-Step får ej dränkas i vatten !**

### Garanti

One-Step har ett års garanti mot fabriktionsfel.

### Felsökning

Om One-Step inte fungerar. Gå först igenom följande punkter. Om felet kvarstår kontaktas RehabCenter AB. Tel 08 - 768 25 00.

#### Problem

One-Step återger ej inspelat meddelande

#### Lösning

1. Kontrollera att batteriet är i bra kondition och rätt inkopplat.
2. Spela in meddelandet på nytt.
3. Skruva upp volymkontrollen till max.
4. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Koppla ur den och prova One-Step igen.
5. Om en yttre manöverkontakt är ansluten. Kontrollera att den sitter urtaget ” switch ”

One-Step talar men säger fel meddelande.

Spela in meddelandet på nytt. Om det ändå blir fel meddelande. Tag ur batteriet, vänta 5 sek, återmontera batteriet och spela in på nytt.

Bara en del av meddelandet spelades in.

Meddelandet var längre än 20 sekunder. Spela in ett kortare meddelandet. Om ”recordknappen” släpps och trycks in igen avbryts inspelningen.

Dålig ljudkvalitet.

Byt batteri.

Talet går saktare.

Byt batteri

Meddelandet repeteras utan att One-Step aktiveras.

Byt batteri