



Artikelnummer

6350-51 Connect™

Se även www.rehabcenter.se för monteringsarmar och manöverkontakter.
Kontakta oss gärna för mer info, demonstration eller hjälp med anpassning.

RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49

www.rehabcenter.se

Connect™

Gör iPad tillgänglig och anpassningsbar



RehabCenter AB

Enhagsvägen 18 187 40 TÄBY
Tel 08 - 768 25 00 Fax 08 - 792 49 49

www.rehabcenter.se

Connect

Connect™ är en lösning för personer som behöver anpassa sin iPad för speciella behov. Någon kanske behöver en möjlighet att montera sin iPad för att kunna hantera pekskärmen. Någon annan ett bättre och starkare ljud för kommunikation. En tredje kanske behöver ett anpassat styrsätt med kontakter och ett skal för att skydda sin iPad mot stötar och slag. Dessa och många andra anpassningar kan göras med hjälp av Connect™.



Lätt att anpassa!


Connect™ har färdiga hål för att skruvas fast på en monteringsarm som med hjälp av en klämma kan fästas på lämpligt ställe. Connect™ har även ett inbyggt stödben som gör att den lättare kan hanteras liggande på ett bord.

Connect™ är anpassad för kommunikation med hjälp av inbyggd ljudförstärkare och bra högtalare.

Connect™ kan styras direkt via pekskärmen, med scanning via en eller två valfria trådbundna kontakter eller via de trådlösa kontakterna Jelly Beamer eller Mini Beamer.

Lätt att hantera!

Connect™ har lättåtkomliga anslutningar och inställningsknappar samt tydliga indikeringar.

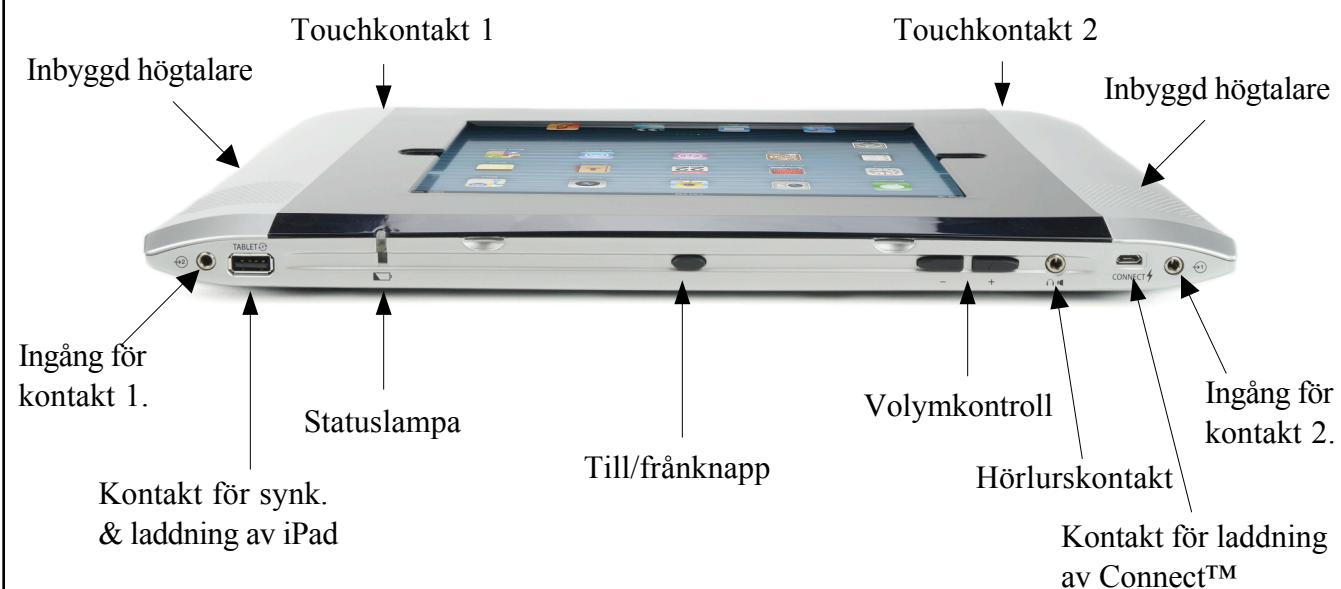

Lätt att placera!


Connect™ är utformad för att passa många olika personers behov och hänsyn har tagits till krav på bland annat sittställning, räckvidd, styrka och precision.



En person som sitter vid ett arbetsbord och har förmåga att arbeta direkt med pekskärmen kan förbättra sin arbetsställning genom att fälla ut det inbyggda stödbenet. Då får iPad en gynnsammare vinkel som kan ge vilsammare ställning.



Den som sitter vid ett arbetsbord men använder ett hjälpmedel för att peka samt behöver ha apparaten liggande för att se bättre faller enkelt in stödbenet.

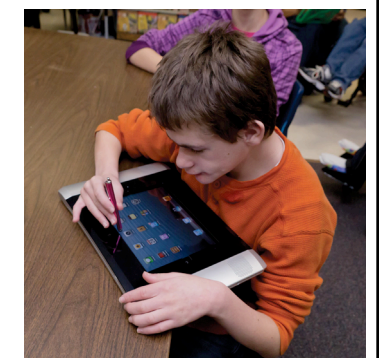

Den som inte kan hantera pekskärmen har möjlighet att ansluta en eller två kontakter och styra sin iPad via scanning. Dessutom kan en monteringsarm användas för att göra en bra placering möjlig.



Specifikationer

- HiFi stereoljud.
- Trådlös och trådbunden kontaktstyrning.
- Skal som skyddar mot stötar, slag och smuts.
- Integrerat batteri, laddning och synkronisering av iPad.
- Uppdateringsbart program för framtida förbättringar.
- Passar alla Ablenet monteringsarmar.
- Kompatibel med iPad 1, 2 och 3.
- Längd 36,1 cm, bredd 24,3 cm, tjocklek 2,5 cm